

ご使用時の注意事項

1. 寒暖の差がある場所から来た方の体温を直ぐに測る場合

一般的な室内と比べて寒暖の差が大きい場所（特に夏季や冬季において外や冷暖房機能がない場所など）から来た方の体温を直ぐに測る際は、皮膚表面が一時的に低温（高温）になっている場合があります。正確な測定ができない可能性があります。

この場合は15分程度、室温に体を馴染ませてから測定することをおすすめいたします。

それが難しい場合は、ひたいではなく、外気温の影響を受けづらい手首などで測定することも可能です。


<手首での測定方法>

夏季

どちらでも測定可能です。

冬季

外気に触れている箇所ではなく、
外気に触れていない箇所で測定してください。

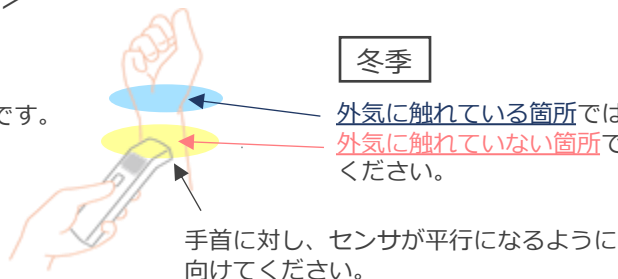

※本来の測定箇所ではないため、あくまで目安であることをご理解ください。


2. 体温測定時の音声について

測定完了時、「ピッ、ピー」とブザー音が2回鳴ります。最初の「ピッ」の段階で体温計を離してしまうと、正しく測定できませんので、音が鳴り終わるまでそのままお待ちください。



3. 電池カバーの開閉について

電池カバーは、外れ防止のため初回は固く開けにくい仕様になっております。突起周辺部分を、下図の青の矢印方向へ少し力をいれて押しながらスライドさせてください。どうしても開けることができない場合は交換をさせていただきますので、バイオエコーネットお問い合わせ・サポートページよりご連絡ください。

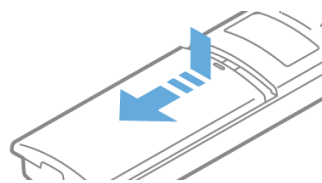

4. 本体の清掃について

本体をアルコール、次亜塩素酸水などの消毒液で清掃しないでください。センサ面が変質し、測定できなくなります。

お問い合わせ・サポート

受付時間

平日10:00~17:00

